



Estas instruções destinam-se exclusivamente ao sensor Dexcom G7. Para informações sobre a ativação de uma sessão com sensor Dexcom G6, consultar o Guia do Utilizador.*



No ecrã Inicial, tocar em **OPÇÕES**.

■ **Nota:** Estas instruções são fornecidas como referência para utilizadores de bombas e cuidadores já familiarizados com a utilização de uma bomba de insulina e com a terapia com insulina em geral.

Estas instruções não apresentam todos os ecrãs.

Para mais pormenores sobre o funcionamento da bomba t.slim X2, consultar o respetivo Guia do Utilizador.



Tocar na seta para baixo e depois tocar em **Minha MCG**.



Se esta for a primeira utilização de um sensor Dexcom G7, tocar em **Selecionar sensor** e, depois, tocar em **Dexcom G7**. Se não for, avançar para o Passo 4.




Dica: O sensor Dexcom G7 necessita de um período de aquecimento de 30 minutos, que começa imediatamente após a inserção, antes de surgir a informação de tendência no ecrã da bomba. Ao emparelhar o seu sensor G7, certifique-se de que todos os outros sensores se encontram a pelo menos 6 metros de distância da sua bomba.



Tocar em **INICIAR SENSOR G7**.

■ **Nota:** Para evitar falhas do sensor, não iniciar uma nova sessão do sensor na aplicação Dexcom e na bomba de insulina t:slim X2. A aplicação Dexcom capta automaticamente o sinal.

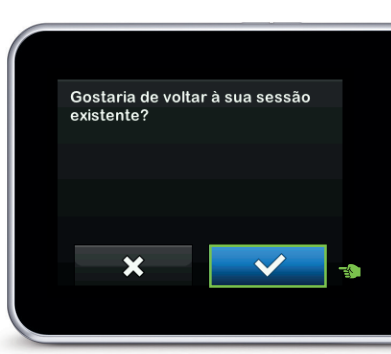


Se o utilizador continuar com uma sessão de sensor ativa após uma reativação da bomba ou uma atualização de *software*, tocar em  e avançar para o Passo 7. Ou, avançar para o Passo 5 para continuar.



Introduzir o código indicado no lado do aplicador do sensor e tocar em  para continuar.



Tocar em **INTRODUZIR CÓDIGO** para confirmar o código de emparelhamento e depois tocar em  para continuar.

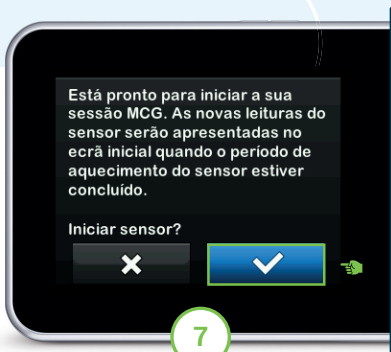

Tocar em  para iniciar o período de aquecimento do sensor.

O ecrã **SENSOR INICIADO** aparece para confirmar.



A bomba regressa ao ecrã inicial com um gráfico de tendência MCG e um símbolo de contagem regressiva de ativação do sensor.

Nota: Se for continuada uma sessão de sensor ativo, o período de aquecimento será de 5 a 10 minutos. Para uma nova sessão pode demorar até 30 minutos.



O símbolo vai ficando cheio, indicando o tempo restante.

Nota: Durante o período de aquecimento, a bomba não apresenta dados do sensor nem permite o uso de tecnologia preditiva. Os utilizadores devem continuar a usar um medidor de glicose no sangue e tiras de teste para tomar as decisões de tratamento.



Depois do período de aquecimento, é iniciada uma nova sessão do sensor.

Nota: Se for apresentado um alerta de Sensor Não Ativado, contactar a assistência Dexcom. Se os alertas e os valores da glicose não corresponderem aos sintomas ou expectativas, usar um medidor de glicemia para tomar decisões sobre o tratamento da diabetes.

Sugestões para Ligação

Se o símbolo Fora de Limites for apresentado no ecrã da bomba de insulina (imagem abaixo), o sensor não está a comunicar com a bomba.

Quando o sensor não pode apresentar um valor da glicose, "- - -" é apresentado no local onde o valor de glicose do sensor é normalmente apresentado.

- ✓ Para uma ligação ideal, o utilizador deve virar o ecrã da bomba para fora e longe do seu corpo e usar a bomba no mesmo lado do corpo em que estiver o sensor
- ✓ Não deve haver nada a fazer fricção ou a obstruir o sensor
- ✓ Ter em atenção que a comunicação sem fios não funciona bem na água, pelo que o alcance da transmissão é menor



CMR-DB347/1

* O MCG é vendido separadamente.

Informações de Segurança Importantes: A bomba de insulina t:slim X2 destina-se à administração subcutânea de insulina, em taxas fixas e variáveis, para o tratamento da diabetes mellitus em pessoas que necessitam de insulina. A bomba pode ainda comunicar de forma fiável e segura com dispositivos compatíveis conectados digitalmente. A bomba é indicada para uso em indivíduos com mais de 6 anos de idade. A bomba destina-se a um único utilizador, em uso doméstico e requer receita médica em alguns países. A bomba é indicada para uso exclusivo de insulina U-100. O Sistema não é indicado para utilização em grávidas, pessoas em diálise ou utilizadores em estado crítico. Os utilizadores da bomba e do Sistema devem: estar dispostos e aptos a usar a bomba de insulina, MCG e todos os outros componentes do sistema, de acordo com as suas respetivas instruções de utilização; testar os níveis de glicose no sangue conforme recomendado pelo seu profissional de saúde; demonstrar capacidade adequada para a contagem de hidratos de carbono; manter um auto-cuidado adequado com a diabetes; consultar o(s) profissional(is) de saúde regularmente; e ter visão e/ou audição adequada para reconhecer todas as funções da bomba, incluindo os sinais de alerta. A bomba t:slim X2 e o transmissor e sensor MCG devem ser removidos antes de tratamentos com ressonância magnética, tomografia axial computadorizada ou diatermia. Consultar o website tandemdiabetes.com/safetyinfo para mais informações importantes sobre segurança.

© 2024 Tandem Diabetes Care, Inc. Reservados todos os direitos. Tandem Diabetes Care, o logótipo Tandem e t:slim X2 são marcas registadas ou marcas comerciais da Tandem Diabetes Care, Inc. nos Estados Unidos e/ou outros países. Dexcom, Dexcom G6, Dexcom G7 e quaisquer logótipos e marcas de design relacionados são marcas registadas ou marcas comerciais da Dexcom, Inc. nos Estados Unidos e/ou outros países. ML-1012333_B

