



Parar a Sessão do Sensor



Estas instruções mostram como se pode interromper manualmente uma sessão do sensor Dexcom G7.* **Ver no interior** como a bomba pode também interromper automaticamente uma sessão do sensor.



No ecrã Inicial, tocar em **OPÇÕES**.

■ **Nota:** Estas instruções são fornecidas como referência para utilizadores de bombas e cuidadores já familiarizados com a utilização de uma bomba de insulina e com a terapia com insulina em geral. Estas instruções não apresentam todos os ecrãs. Para mais pormenores sobre o funcionamento da bomba t.slim X2, consultar o respetivo Guia do Utilizador.



Tocar na seta para baixo e depois tocar em **Minha MCG**.



Tocar em **PARAR SENSOR G7**.

■ **Nota:** Se a sessão do sensor terminar antecipadamente, o utilizador não pode iniciar novamente a sessão com o mesmo sensor. Neste caso, deve ser usado um novo sensor.



Dica: Após o término da sessão do sensor, os alertas e alarmes de glicose do sensor deixam de ser recebidos e a tecnologia Control-IQ fica inativa.



Tocar em  para confirmar que o utilizador deseja parar a sessão do sensor em curso.



Tocar em  para confirmar que a sessão do sensor não pode ser reativada.

O ecrã SENSOR PARADO aparece para confirmar.



O ecrã inicial apresenta o símbolo Substituir Sensor no local onde é apresentado o valor da glicose do sensor.



O utilizador deve remover o sensor e inserir um novo sensor. Os valores da glicose do novo sensor não são apresentadas no Ecrã Inicial até ser iniciada uma nova sessão do sensor.

Desligar automaticamente o sensor

O sensor de monitorização contínua de glicose (MCG) Dexcom G7 é indicado para ser usado, no máximo, durante 10 dias, mais um período adicional de 12 horas.

O ecrã Sensor Expira Brevemente aparece na bomba de insulina para informar o utilizador sobre o tempo restante até a sessão do sensor ser concluída. O utilizador tem a opção de parar manualmente a sessão do sensor antes que ela expire ou deixar o sensor desligar-se automaticamente.

■ Nota: Durante o período adicional de 12 horas, a bomba continua a receber os valores de glicose do sensor, permitindo o uso de tecnologias preditivas.




Após o sensor ter expirado, é iniciado um período adicional de 12 horas com lembretes adicionais.



Depois do período de 12 horas, é apresentado o ecrã Substituir sensor.

Tempo Remanescente do Sensor

A qualquer momento durante a sessão do sensor, os utilizadores podem saber quando a sessão do sensor foi iniciada e quanto tempo resta, tocando no símbolo do nível de insulina no ecrã inicial e tocando, em seguida, duas vezes na seta para baixo.

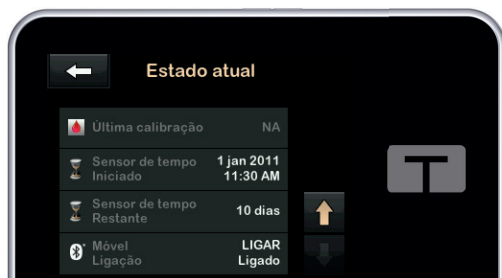

CMR-DB346/1

* O MCG é vendido separadamente.

Informações de Segurança Importantes: A bomba de insulina t:slim X2 com tecnologia Control-IQ (o Sistema) é composto por uma bomba de insulina t:slim X2, que contém a tecnologia Control-IQ, e um monitor contínuo de glicose compatível (MCG, vendido separadamente). A bomba de insulina t:slim X2 destina-se à administração subcutânea de insulina, em taxas fixas e variáveis, para o tratamento da diabetes mellitus em pessoas que necessitam de insulina. A bomba de insulina t:slim X2 pode ser usada apenas para administração contínua de insulina e como parte do Sistema. Quando usado com um MCG compatível, o Sistema pode ser usado para aumentar, diminuir e suspender automaticamente a administração de insulina basal, com base nos valores registados pelo sensor MCG e nos valores de glicose previstos. O Sistema pode também administrar bólus de correção se for previsto que o valor da glicose pode exceder um limite predefinido. A bomba e o Sistema são indicados para uso em indivíduos com mais de 6 anos de idade. A bomba e o Sistema devem ser utilizados apenas por uma pessoa. A bomba e o Sistema são indicados para uso exclusivo de insulina U-100.

ATENÇÃO: A Tecnologia Control-IQ não deve ser utilizada em pessoas com menos de 6 (seis) anos de idade. Também não deve ser usada em pessoas que necessitem de menos de 10 unidades de insulina por dia ou que pesem menos de 25 kg.

O Sistema não é indicado para utilização em grávidas, pessoas em diálise ou utilizadores em estado crítico. Não utilizar o Sistema caso esteja medicado com hidroxíureia. Os utilizadores da bomba e do Sistema devem: estar dispostos e aptos a usar a bomba de insulina, MCG e todos os outros componentes do sistema, de acordo com as suas respetivas instruções de utilização; testar os níveis de glicose no sangue conforme recomendado pelo seu profissional de saúde; demonstrar capacidade adequada para a contagem de hidratos de carbono; manter um auto-cuidado adequado com a diabetes; consultar o(s) profissional(is) de saúde regularmente; e ter visão e/ou audição adequada para reconhecer todas as funções da bomba, incluindo os sinais de alerta. A bomba t:slim X2 e o transmissor e sensor MCG devem ser removidos antes de tratamentos com ressonância magnética, tomografia axial computadorizada ou diatermia. Consultar o website tandemdiabetes.com/safetyinfo para mais informações importantes sobre segurança.

© 2023 Tandem Diabetes Care, Inc. Reservados todos os direitos. Tandem Diabetes Care, o logótipo Tandem e t:slim X2 são marcas registadas ou marcas comerciais da Tandem Diabetes Care, Inc. nos Estados Unidos e/ou outros países. Dexcom, Dexcom G6, Dexcom G7 e quaisquer logótipos e marcas de design relacionados são marcas registadas ou marcas comerciais da Dexcom, Inc. nos Estados Unidos e/ou outros países. ML-1012334_A

