



APLICAÇÃO MÓVEL TANDEM T:SLIM

Bólus através da aplicação móvel




Para administrar um bólus através da aplicação móvel Tandem t:slim, é necessário emparelhar um *smartphone* compatível com a bomba de insulina t:slim X2 através de uma ligação sem fios *Bluetooth®* ativa.*

Consulte o Guia da Aplicação disponível na própria aplicação para obter informações sobre dispositivos compatíveis.



■ **Nota:** Estas instruções destinam-se a ser utilizadas como uma ferramenta de referência para utilizadores da bomba e cuidadores que já estão familiarizados com a utilização de uma bomba de insulina e com a terapêutica de insulina em geral. Nem todos os ecrãs são apresentados, e alguns podem variar consoante o modelo do telemóvel do utilizador. Para informações mais detalhadas sobre o funcionamento da aplicação móvel Tandem t:slim, consulte a secção apropriada no manual do utilizador.

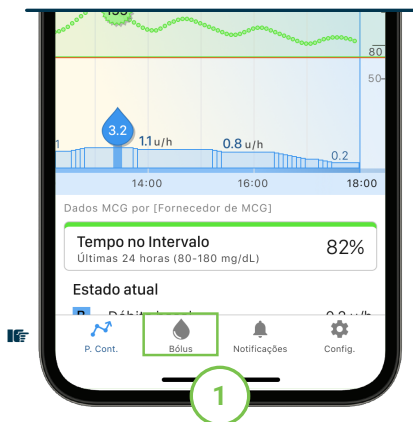

Toque em **Bólus** na barra de navegação.

■ **Nota:** Para administrar um bólus alargado ou rápido, tem de utilizar a bomba de insulina t:slim X2.



Toque em **0 gramas** para inserir os hidratos de carbono para o bólus do utilizador.

■ **Nota:** Se esta área apresentar “unidades”, a funcionalidade de hidratos de carbono está desativada no Perfil Pessoal ativo.



Insira o valor desejado.
Toque em **Concluído** para continuar.



Toque em **+ mg/dL** para inserir a glicose do utilizador e depois toque em **Concluído**.

■ **Nota:** Com certas funcionalidades avançadas, a leitura atual do sistema de monitorização contínua da glicose (MCG) pode ser preenchida automaticamente.



Se for inserida uma glicemia superior ao alvo, surgirá a opção para adicionar um bôlus de correção. Toque em **Sim** ou **Não**.



Se for inserida uma glicemia inferior ao alvo, mas superior a 70 mg/dL, surgirá a opção para reduzir o valor do bôlus. Toque em **Sim** ou **Não**.



Toque em **Seguinte** (iOS) ou na **Seta para a Direita** (Android) para continuar.

■ **Nota:** Se o bólus calculado for superior ao valor máximo definido, o bólus será reduzido automaticamente. Também pode alterar o valor do bólus tocando nas unidades calculadas no topo do ecrã.



Toque em **Confirme** (iOS) ou no **símbolo de verificação** (Android) para validar.

■ **Nota:** Os cálculos baseiam-se nos rácios de insulina/hidratos de carbono e nos fatores de correção definidos nos Perfis Pessoais.



Toque em **Administrar bólus**. Utilize a funcionalidade de segurança do telemóvel para confirmar. Surgirá um ecrã com a confirmação do bólus, tanto na bomba como na aplicação.



Para cancelar um bólus, toque em  no painel principal da aplicação ou em  no ecrã inicial da bomba. Confirme o cancelamento.

* A administração de bólus através da aplicação móvel Tandem t:slim requer um modelo de telemóvel e sistema operativo compatível, uma atualização da aplicação, uma atualização remota do software da bomba de insulina t:slim X2 e formação adicional.

Informações importantes de segurança: A bomba de insulina t:slim X2 destina-se à administração de insulina por via subcutânea, a débitos fixos e variáveis, para a gestão da diabetes mellitus em pessoas que requerem insulina. A bomba consegue comunicar, de forma fiável e segura, com dispositivos compatíveis, ligados digitalmente.

A tecnologia Control-IQ destina-se a ser utilizada com um sistema de monitorização contínua da glicose (MCG) e a bomba de insulina t:slim X2 para aumentar, diminuir e suspender automaticamente a administração de insulina basal com base nas leituras do sistema MCG e nos valores previstos de glicose. Pode ainda administrar bólus de correção quando se prevê que o valor de glicose ultrapasse o limite predefinido. A bomba é indicada para utilização em pessoas com idade igual ou superior a seis anos que necessitem de uma dose de insulina diária total de, pelo menos, 10 unidades e que pesem, pelo menos, 25 Kg. A bomba destina-se a ser utilizada por um único utilizador. Para uma lista de insulinas compatíveis, consultar o Manual do Utilizador.

AVISO: A tecnologia Control-IQ não deve ser utilizada por pessoas com menos de 6 anos. Também não deve ser utilizada por pessoas que requerem menos de 10 unidades de insulina por dia ou com um peso inferior a 25 Kg.

O Sistema não é indicado para ser utilizado em grávidas, pessoas em diálise, ou utilizadores gravemente doentes. Não utilize o Sistema se tomar hidroxiureia. Os utilizadores da bomba e do sistema devem: estar dispostos e ser capazes de utilizar a bomba de insulina, o MCG e todos os outros componentes do sistema de acordo com as respetivas instruções de utilização; efetuar os testes de glicemia como recomendado pelo seu profissional de saúde; demonstrar capacidades adequadas de contagem de hidratos de carbono; demonstrar capacidades suficientes de autogestão da diabetes; consultar o profissional de saúde regularmente; e ter visão e/ou audição adequadas para reconhecer todas as funções da bomba, incluindo os alertas, alarmes e lembretes. A bomba t:slim X2 tem de ser retirada antes da realização de quaisquer exames de RM, TAC ou diatermia. Para informações adicionais importantes de segurança, aceda a tandemdiabetes.com/safetyinfo.

As informações apresentadas na aplicação móvel Tandem t:slim podem não ser idênticas ao estado atual da sua bomba. A sincronização sem fios dos dados da aplicação móvel Tandem t:slim para a plataforma Tandem Source baseada na nuvem requerem um telemóvel compatível, uma ligação à Internet ou dados móveis. Os carregamentos para a plataforma Tandem Source não ocorrem em tempo real e não devem ser usados pelos profissionais de saúde ou cuidadores para a monitorização remota do paciente. Podem aplicar-se tarifas de dados da operadora.

Aplicação móvel Tandem t:slim: A aplicação móvel Tandem t:slim destina-se a disponibilizar um ecrã secundário para bombas de insulina Tandem Diabetes Care compatíveis e tem a capacidade de carregar dados da bomba para a plataforma Tandem Source. A aplicação móvel Tandem t:slim não se destina a controlar a bomba de insulina e não pretende substituir as informações apresentadas na sua bomba de insulina. As decisões de dosagem não devem ser tomadas com base neste dispositivo de visualização secundário. O utilizador deve seguir as instruções do sistema de monitorização contínua da glicose e da bomba de insulina. Este dispositivo de visualização secundário não se destina a substituir as práticas de automonitorização, conforme aconselhado por um médico.

© 2024 Tandem Diabetes Care, Inc. Todos os direitos reservados. Tandem Diabetes Care, os logótipos Tandem, Control-IQ e t:slim X2 são marcas registadas ou marcas comerciais da Tandem Diabetes Care, Inc. nos Estados Unidos e/ou noutros países. A palavra e os logótipos Bluetooth® são marcas registadas pertencentes à Bluetooth SIG, Inc., e qualquer utilização dessas marcas por parte da Tandem Diabetes Care é feita sob licença. iOS é uma marca comercial ou marca registada da Cisco nos EUA e noutros países, e é utilizada sob licença. Android é uma marca comercial da Google LLC. ML-1014660_A

CMR-D-DB449/1