



APLICAÇÃO MÓVEL TANDEM T:SLIM


Emparelhar a aplicação móvel



Após a conclusão do processo de emparelhamento, é feito o *upload* sem fios dos dados da bomba e do tratamento para a plataforma Tandem Source.*



■ **Nota:** Estas instruções são facultadas como um guia de referência para pessoas que já estão familiarizadas com a utilização da bomba de insulina da Tandem Diabetes Care. Nem todos os ecrãs se encontram apresentados. Para informação mais detalhada sobre o funcionamento da bomba de insulina t:slim X2, consulte o Manual do Utilizador.

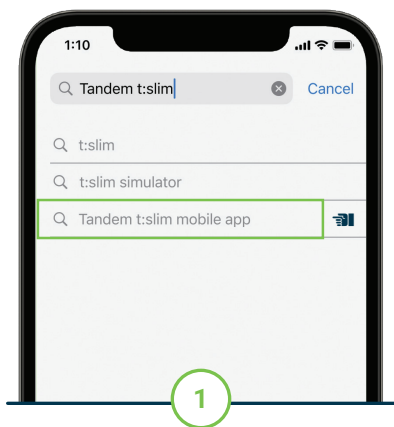

Num telemóvel compatível, pesquise a aplicação móvel “Tandem t:slim” no Google Play ou na App Store e instale-a.



Abra a aplicação móvel Tandem t:slim e inicie sessão com as credenciais existentes ou crie uma conta.



Dica: Apenas é possível emparelhar um telemóvel e uma conta da aplicação móvel Tandem t:slim com a bomba. A bomba foi concebida para rejeitar quaisquer ligações não autorizadas.



A partir do ecrã inicial, toque em **OPÇÕES**.

■ **Nota:** É necessário emparelhar a bomba de insulina t:slim X2 com um telemóvel compatível através da tecnologia *Bluetooth®* para que a bomba comunique corretamente com a aplicação móvel.



Toque na seta para baixo e depois toque em **Config. dispositivo**.




Toque em **Configurações de Bluetooth**.



Toque no botão de ativar/desativar para ativar.



Toque em  para continuar.

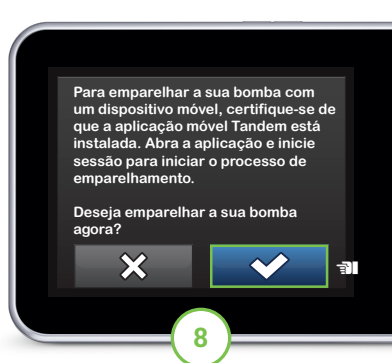

Será apresentado um ecrã de confirmação para confirmar o emparelhamento.
Toque em  para continuar.



Selecione **Iniciar** e depois **OK** no ecrã de confirmação.



Selecione o botão de seleção junto à bomba e toque em **Seguinte**.



Um código de emparelhamento único será gerado automaticamente.

NÃO prima  pois isso irá cancelar o processo.



O código de emparelhamento é válido apenas durante cinco minutos. Se o código expirar, o processo de emparelhamento terá de ser reiniciado.



Na aplicação móvel, insira o código de emparelhamento e toque em **Emparelhar com a bomba**.

🚩 **Nota:** O código de 16 caracteres distingue maiúsculas de minúsculas e deve ser inserido exatamente como apresentado.



Um ecrã de confirmação será apresentado na bomba.

Toque em  para continuar.




Prima **Sincronizar dados da bomba** para importar os dados recentes da bomba de insulina.



Assim que a aplicação móvel Tandem t:slim apresentar os dados da bomba, está pronta para visualização.

Configuração do telemóvel

- ✓ Desative sempre o modo de Zoom ao utilizar a aplicação móvel. Se estiver ativado, confie na bomba de insulina para todas as decisões terapêuticas.
- ✓ Ative sempre as notificações e desative a otimização de bateria para receber alertas, alarmes e notificações da bomba no telemóvel emparelhado
- ✓ Ative a segurança do telemóvel (por exemplo, bloqueio de ecrã, código, reconhecimento facial) antes de administrar um bólus a partir da aplicação†

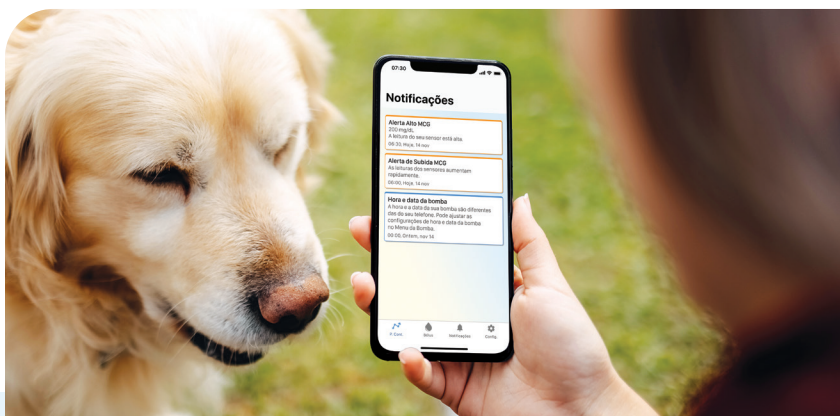



Sugestão da aplicação: A aplicação móvel Tandem t:slim deve estar a funcionar em segundo plano para poder receber e transmitir dados de e para a bomba, bem como para a Tandem Source.*

* Os uploads para a plataforma Tandem Source não ocorrem em tempo real e não devem ser usados pelos utilizadores da bomba, profissionais de saúde ou cuidadores para a monitorização remota do paciente. † A administração de bólus através da aplicação móvel Tandem t:slim requer um modelo de telemóvel e sistema operativo compatível, uma atualização da aplicação, uma atualização remota do software da bomba de insulina t:slim X2 e formação adicional.

Informação de segurança importante: A bomba de insulina t:slim X2 destina-se à administração subcutânea de insulina, em débitos fixos e variáveis, para o tratamento da diabetes mellitus em pessoas que necessitam de insulina. A bomba é capaz de comunicar de forma fiável e segura com dispositivos compatíveis e conectados digitalmente.

A tecnologia Control-IQ destina-se a ser utilizada com um sistema de monitorização contínua da glicose (MCG) e a bomba de insulina t:slim X2 para aumentar, diminuir e suspender automaticamente a administração de insulina basal com base nas leituras do sistema MCG e nos valores previstos de glicose. Pode ainda administrar bólus de correção quando se prevê que o valor de glicose ultrapasse o limite predefinido. A bomba é indicada para utilização em pessoas com idade igual ou superior a seis anos que necessitem de uma dose de insulina diária total de, pelo menos, 10 unidades e que pesem, pelo menos, 25 quilogramas. A bomba destina-se a ser utilizada por um único paciente. Para uma lista de insulinas compatíveis, consultar o Manual do Utilizador.

AVISO: A tecnologia Control-IQ não deve ser utilizada por pessoas com menos de 6 anos. Também não deve ser utilizada por pessoas que requerem menos de 10 unidades de insulina por dia ou com um peso inferior a 25 quilos.

O Sistema não é indicado para ser utilizado em grávidas, pessoas em diálise, ou utilizadores gravemente doentes. Não utilize o Sistema se tomar hidroxiureia. Os utilizadores da bomba e do sistema devem: estar dispostos e ser capazes de utilizar a bomba de insulina, o MCG e todos os outros componentes do sistema de acordo com as respetivas instruções de utilização; efetuar os testes de glicemia como recomendado pelo seu profissional de saúde; demonstrar capacidades adequadas de contagem de hidratos de carbono; demonstrar capacidades suficientes de autogestão da diabetes; consultar o profissional de saúde regularmente; e ter visão e/ou audição adequadas para reconhecer todas as funções da bomba, incluindo os alertas, alarmes e lembretes. A bomba t:slim X2 tem de ser retirada antes da realização de quaisquer exames de RM, TAC ou diatermia. Para informações adicionais importantes de segurança, aceda a tandemdiabetes.com/safetyinfo.

As informações apresentadas na aplicação móvel Tandem t:slim podem não ser idênticas ao estado atual da sua bomba. Os carregamentos sem fios da aplicação móvel Tandem t:slim para a plataforma Tandem Source baseada na nuvem requerem um telemóvel compatível, uma ligação à Internet ou dados móveis. Os carregamentos para a plataforma Tandem Source não ocorrem em tempo real e não devem ser usados pelos profissionais de saúde ou cuidadores para a monitorização remota do paciente.

Aplicação móvel Tandem t:slim: A aplicação móvel Tandem t:slim destina-se a disponibilizar um ecrã secundário para bombas de insulina Tandem Diabetes Care compatíveis e tem a capacidade de carregar dados da bomba para a plataforma Tandem Source. A aplicação móvel Tandem t:slim não se destina a controlar a bomba de insulina e não pretende substituir as informações apresentadas na sua bomba de insulina. As decisões de dosagem não devem ser tomadas com base neste dispositivo de visualização secundário. O utilizador deve seguir as instruções do sistema de monitorização contínua da glicose e da bomba de insulina. Este dispositivo de visualização secundário não se destina a substituir as práticas de automonitorização, conforme aconselhado por um médico.

A plataforma Tandem Source destina-se a ser utilizada por indivíduos com diabetes mellitus que utilizam bombas de insulina Tandem Diabetes Care, pelos seus cuidadores e pelos seus profissionais de saúde em casa e em ambientes clínicos. A plataforma Tandem Source apoia a gestão da diabetes através da visualização e análise de informações carregadas a partir das bombas de insulina Tandem.

© 2024 Tandem Diabetes Care, Inc. Todos os direitos reservados. Tandem Diabetes Care, os logótipos Tandem, t:slim X2, Control-IQ e Tandem Source são marcas registadas ou marcas comerciais da Tandem Diabetes Care, Inc. nos Estados Unidos e/ou noutros países. A palavra e os logótipos Bluetooth® são marcas registadas pertencentes à Bluetooth SIG, Inc., e qualquer utilização dessas marcas por parte da Tandem Diabetes Care é feita sob licença. App Store é uma marca de serviço da Apple Inc. Google Play é uma marca comercial da Google LLC. ML-1014647_A

CMR-DB450/1