





Guia de configuração de *software*



Aceda a:
source.tandemdiabetes.com

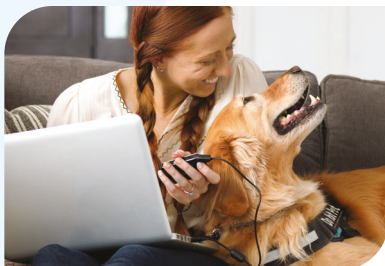


Criar conta

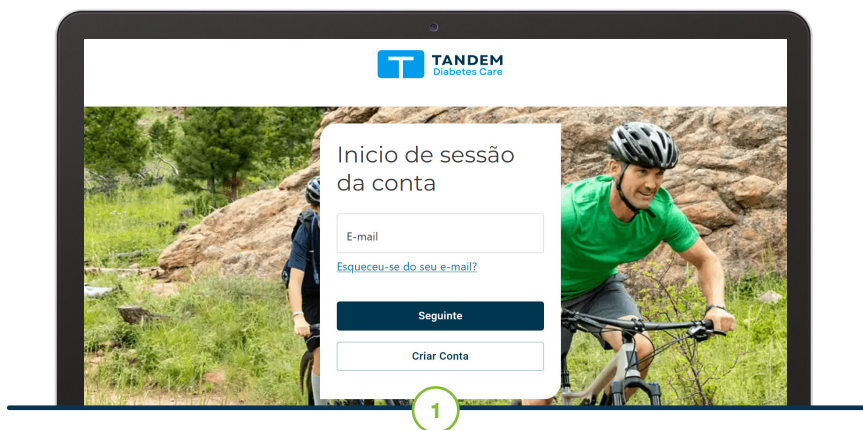

Se já tiver uma conta Tandem, inicie sessão utilizando o seu e-mail e *password*.

- ✓ Se não tiver uma conta Tandem, clique em **Criar conta** e siga as instruções que aparecem no ecrã. Será enviado um e-mail de verificação para ativar a sua conta.

Partilhar conta

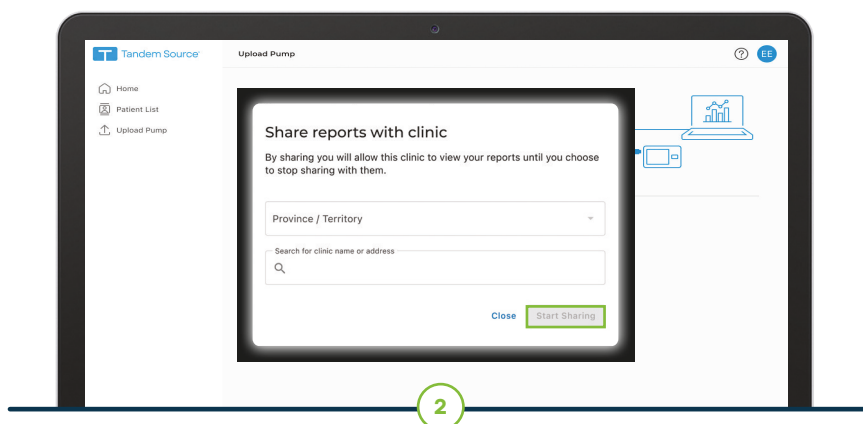


Clique no círculo com as suas iniciais que se encontra no canto superior direito e selecione **Definições de conta**.


- ✓ Selecione **Partilhar relatórios** e, de seguida, clique no botão **Adicionar clínica**
- ✓ Selecione a sua localização ou comece a escrever o nome da sua clínica para filtrar a sua pesquisa
- ✓ Selecione a sua clínica e verifique se é a correta através do endereço associado

Upload da bomba

- ✓ Clique em **Carregar bomba** na barra de navegação do lado esquerdo
- ✓ Conecte a bomba ao computador através do cabo USB que foi fornecido com a bomba

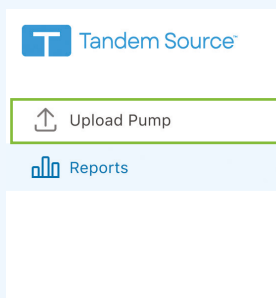

Poderá surgir um *pop-up* a informar que `source.tandemdiabetes.com` quer conectar-se a um *serial port*. Clique em Tandem Virtual COM Port e, de seguida, clique em **Conectar**.

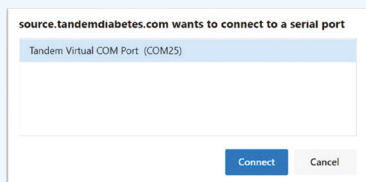

- ✓ Clique em **Começar upload** para dar início ao *upload* dos dados
- ✓ A primeira vez que fizer o *upload* será solicitado que conecte a sua bomba. Selecione **Conectar bomba**
- ✓ Não desconecte a bomba até aparecer o símbolo de verificação (*check mark*) a confirmar o sucesso do *upload* dos dados



O *upload* dos dados também pode ser feito através do cabo USB fornecido com a bomba



A plataforma Tandem Source destina-se a ser utilizada por pessoas com diabetes mellitus que utilizam bombas de insulina Tandem Diabetes Care, pelos seus cuidadores e pelos seus profissionais de saúde em casa e em ambientes clínicos. A plataforma Tandem Source apoia a gestão da diabetes através da visualização e análise de informações carregadas a partir das bombas de insulina Tandem.

© 2024 Tandem Diabetes Care, Inc. Todos os direitos reservados. Tandem Diabetes Care, os logótipos Tandem, Control-IQ, Tandem Source, t:slim e t:slim X2 são marcas registadas ou marcas comerciais da Tandem Diabetes Care, Inc. nos Estados Unidos e/ou noutros países. A palavra e os logótipos Bluetooth® são marcas registadas pertencentes à Bluetooth SIG, Inc., e qualquer utilização dessas marcas por parte da Tandem Diabetes Care, Inc. é feita sob licença. Todas as marcas de terceiros são propriedade dos respetivos titulares. ML-1014688_A

CMR-D-DB463/1